

In vier Schritten zur Haarkollektion

1

Sammelwerkzeuge: 1. Haarspange 2. Schere 3. Kugelschreiber 4. Alkoholwischttuch

1. Reinigen Sie die Schere und die Haarspange mit einem Alkoholtupfer.
2. Das Haar des Teilespenders horizontal über die Krone legen und das Haar aus dem Haar heraus sichern.
3. Schneiden Sie ca. 20-30 Haarsträhnen von FÜNF kleinen Bereichen entlang der gesamten Länge, die Teillinie an der Krone
4. Schneiden Sie die Haarprobe so nah wie möglich an der Kopfhaut ab.

NOTE: Sie sollten insgesamt 90 bis 120 Haarsträhnen sammeln, oder die äquivalente Größe eines gewöhnlichen Sodastrohs. Nehmen Sie mehr Stränge, wenn die Das Haar des Spenders ist weniger als 1,5 Zoll lang. Beim Sammeln von Körperhaaren, ein Probenäquivalent in der Größe eines gewöhnlichen 1" Wattebausches sammeln.




2

1. Platzieren Sie ROOT ENDE an der Kante auf der Seite des Haares. SPECIMEN TRANSPORT (HST) markiert PLACE ROOT ENDE HIER.
2. Glätten Sie das Haar auf ganzer Länge entlang der Mittellinie des HST. Halten der Wurzelenden am Rand der Folie zusammen.
3. Falten Sie HST über die Mittellinie.
4. Falten Sie wieder LÄNGENWEIT.
5. Jedes Haar, das länger als die Folie ist, sollte umwickelt werden, die gefaltete Folie.
6. In den HAARSPEZIFISCHEN POUCH legen.

ANMERKUNGEN:


- Sammler können die Folie fester falten oder eine zusätzliche Längsfaltung hinzufügen, für lockiges Haar, wenn nötig
- Es ist nicht notwendig, die Haarwurzeln auszurichten, um Körperhaare zu sammeln.

1 ⇒

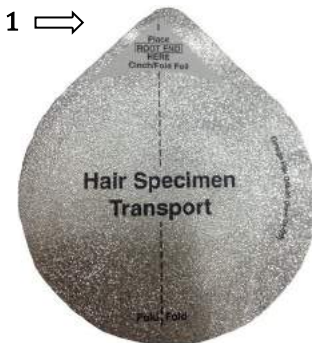

2 ⇒

3 ↓

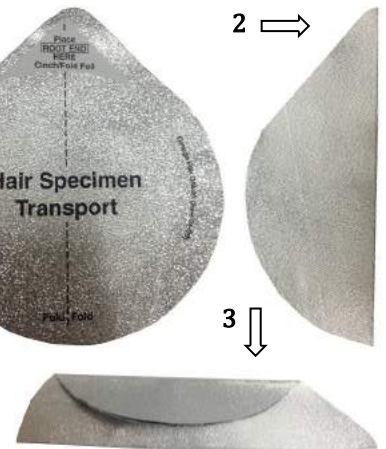

3

Sobald sich die Probe im HAARSPECIMEN POUCH befindet, versiegeln Sie sie. der HAARSPEZIFISCHE POUCH, der sicherstellt, dass die Klappe vollständig verschlossen ist.



4

Legen Sie den versiegelten HAARSPEZIFISCHEN POUCH in den transparenten Kunststoff. TRANSPORTBAG und verschließen Sie den Beutel mit der Klebelasche. Die Probe ist jetzt versandfertig!



BITTE DENK DARAN:

1. Machen Sie mehrfache Schnitte, nehmen Sie NICHT die gesamte Probe von einer Stelle.
2. MÜSSEN SIE auf dem Probenentnahmeformular markieren, wenn es sich bei der Probe um Kopf oder Körperhaar handelt.
3. Mische Kopf- und Körperhaare NICHT. Sammle NUR EINEN ODER DEN ANDEREN Haartyp.
4. Senden Sie NICHT mehr als einen HST pro HAARSPEZIFISCHEN POUCH. Mehrere Proben führen zur Ablehnung der Probe.

Hilfreiche Ratschläge zur Haarprobe sammlung

Haare	Tipps zur Sammlung
Kurze Haare	Wenn das Haar weniger als 1,5" beträgt, sammeln Sie mehr Strähnen, um die Gewichtsdiﬀerenz zu berücksichtigen. Sammeln von mehreren Stellen aus, um kahle Stellen zu vermeiden. Haare, die kleiner als 1,5" sind, können in der Mitte der Folie platziert werden.
Langhaar	Wenn das Haar länger als 1,5" ist, nach dem Ausrichten der Wurzelenden und dem Falten der Folie in Längsrichtung. zweimal, wickeln Sie einfach die Restlänge um die Außenseite der Folie.
Gelocktes Haar	Wenn Sie Schwierigkeiten haben, die Wurzelenden auf lockiges Haar auszurichten, haben Sie eine andere Kollektorhilfe, indem Sie das bereits gesammelte Haar halten, während Sie zusätzliche Schnitte machen. Drücken Sie die Folie während des Faltens um die fertige Probe, um die Wurzelenden ausgerichtet zu halten.
Dünnes Haar	Sammle Haare von mehreren Stellen, um kahle Stellen zu vermeiden. Wenn die Länge 1,5" beträgt oder länger, denken Sie daran, die Wurzelenden am entsprechenden Ende der Folie ausgerichtet zu halten.
Zöpfe Dreadlocks Webarten	Wenn ein Spender Kunst-/Kunsthaar mit Echthaar verbunden hat, muss er es vorher entfernen. zur Sammlung. Stellen Sie sicher, dass alle gesammelten Haare aus der Kopfhaut herauswachsen. Notieren Sie sich die Probenentnahmeformular, aus dem hervorgeht, dass Kunsthaar entfernt wurde, um eine korrekte Dokumentation zu gewährleisten.
Körperbehaarung	Wenn ein Spender sehr kurze (weniger als 0,5") oder keine Kopfbehaarung hat, muss Körperbehaarung entnommen werden. Die Wurzelenden müssen für Körperhaare nicht ausgerichtet werden. Sammeln Sie ein Probenäquivalent in der Größe eines gewöhnlicher 1" Wattebausch. Körperbehaarung kann an mehreren Stellen des Körpers gesammelt werden (einschließlich Gesichtsbehandlung) und in der Folie vermischt, um die für den Test erforderliche Menge zu erhalten. Körper und Kopfhaar können aufgrund unterschiedlicher Zeiträume NICHT gemischt werden.
Nackenhaare	Beim Sammeln von Nackenhaaren ist darauf zu achten, dass die Wurzelenden ausgerichtet bleiben und an einem geeigneten Ende platziert werden. von Folie. Sammeln Sie die empfohlene Menge und geben Sie den Standort an, der auf der Probenahme gesammelt wurde. Formular. Nackenhaare gelten als Kopfhaare.